


**Indonesia**  
Masukan kedua kaki side rail pada lubang yang terdapat pada sisi kanan dan kiri main frame bed.

**English**  
Insert both of leg of the side rail into their pair holes located at the right and left side of the bed mainframe.

**Indonesia**  
Jika side rail tidak digunakan simpanlah side rail dengan memasukan kedua kakinya pada lubang yang ada pada bagian belakang papan kaki (foot Board).

**English**  
If the side rail is not being used, lift the rail side up from its normal position and remove it to the foot section of the bed mainframe. Insert the both into their reserved pair holes.

SET CASTER ON LOCKED AND UNLOCKED

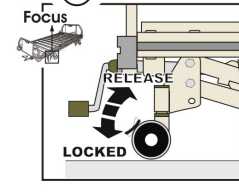

**Indonesia**  
Pergunakan pedal pengunci pada caster dengan petunjuk sebagai berikut: Tekan ke bawah untuk posisi mengunci. Tarik ke atas untuk posisi bebas.

**English**  
Use the caster lock pedal with this directions : Push the pedal down to lock the caster so that it could not be moved. Pull the pedal up to unlock the caster and it can be moved freely.

**Indonesia**  
**CARA PENGGUNAAN BED DAN YANG HARUS DI PERHATIKAN**  
1. Caster  
• Pastikan Caster dalam posisi tidak terkunci saat bed akan dipindahkan/digerakan.  
• Pastikan Caster dalam posisi terkunci pada saat bed tidak akan dipindahkan/digerakan.  
2. Sebelum mengoperasikan crank dan back rest/ bottom A pastikan posisi tangan dan kaki pasien dalam kondisi aman (tidak tertepi oleh bagian bed). Bertahukan kepada pasien dan operasikan secara perlahan-lahan.  
3. Head - Foot Board  
• Pastikan Head Board dan Foot Board selalu dalam kondisi terkunci pada saat bed dipergunakan/tidak dipergunakan.  
4. Side Rail  
• Fungsi Side Rail adalah menjaga pasien supaya tidak terjatuh.  
• Pastikan Side Rail dalam kondisi terpasang apabila bed sedang dipergunakan oleh pasien dalam keadaan bed diam atau bergerak. Berhati-hatilah.

**English**  
**USER MANUAL FOR NURSING BED**  
1. Caster  
• Make sure that the casters are unlocked when the bed is moved or removed.  
• Make sure that the caster are locked when the bed is not going to be moved.  
2. Make sure that patient's body is on the safe area before crank and back/ foot rest operations. Inform the patient gently and do the operations carefully.  
3. Head - Foot Board  
• Make sure that Head-Foot Board are always locked.  
4. Side Rail  
• Make sure that both side rails are properly installed, especially when there is a patient on the bed despite being moving or not to moving.