

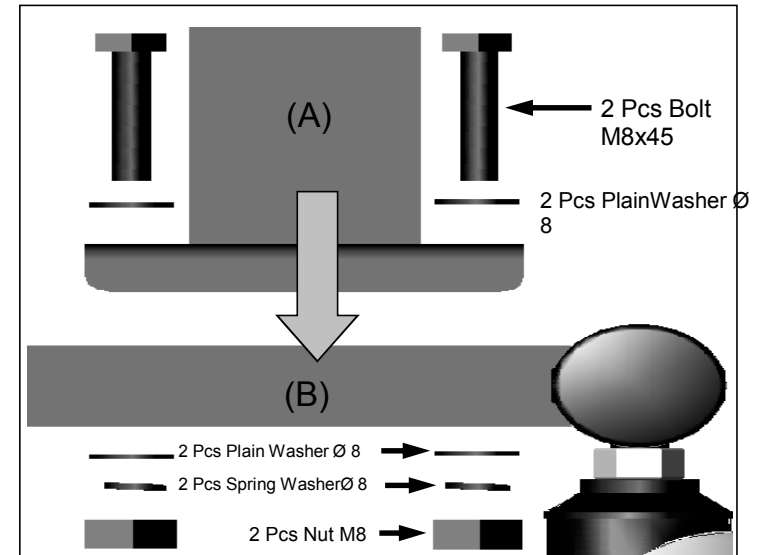


PETUNJUK PEMASANGAN BED SIDE TABLE (TB-002)

MANUAL GUIDE FOR ASSEMBLING BED SIDE TABLE (TB-002)

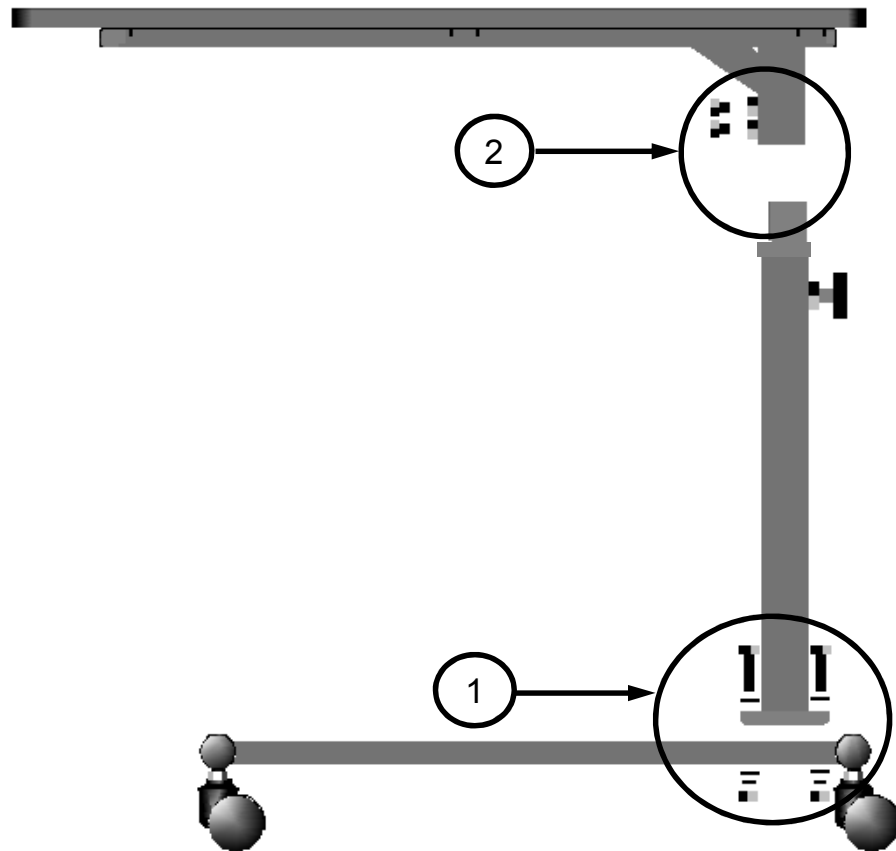

1. Pasang *Housing Pipe (A)* ke *Lower Compl (B)* dan kencangkan dengan menggunakan 4 pcs plain washer Ø 8, 2 pcs spring washer Ø 8, dan baut ukuran M8x45

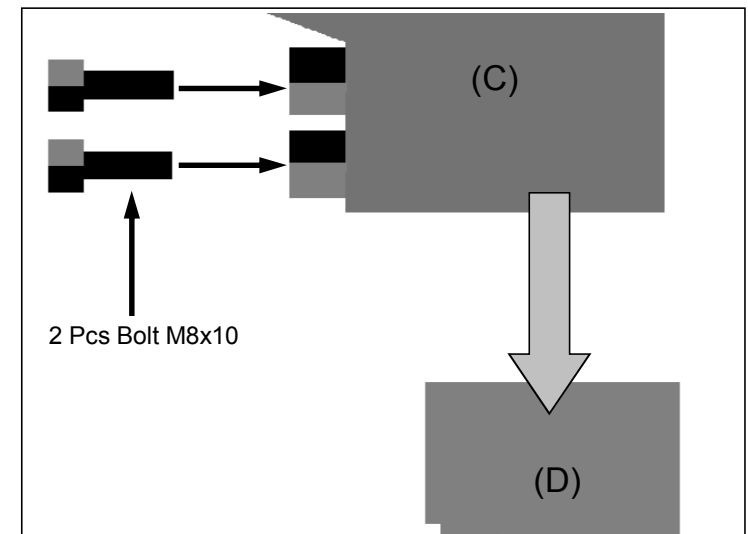

2. Pasang *Table Top (C)* ke *sliding compl (D)* dan kencangkan dengan menggunakan baut M8x10

