

CB3003 plus



FEATURES & PROCEDURES



Head/foot board panel dismantle

Head/foot board panel installation

Irrigator bar installation (applicable for every nursing bed)



Independent lock caster (one at front and one at back of the bed) provides stability and secure parking
An unique eye catching foldable crank is designed to give high-low bed adjustable

Fungsi Standar

Sistem Operasi : 3 Operasi Crank untuk posisi Tinggi-Rendah, Sandaran Kepala & Sandaran kaki

Posisi : - Tinggi - Renda : Digerakkan manual dengan Crank
- Sandaran Kepala : Digerakkan manual dengan Crank, mulai dari 0° sampai 80°
- Sandaran Kaki : Digerakkan manual dengan cank, mulai dari 0° sampai 80°

Keutamaan : - design sederhana, sudut tidak tajam (permukaan halus)
- Mekanisme pengoperasian sederhana, menggunakan sistem crank
- Kokoh dan anti karat
- Roda yang mudah digerakkan dan ditempatkan, dengan sistem kunci - tanpa kunci

Sistem Penguncian : Sistem penguncian ganda pada roda caster

Assesories : tiang IV (2 tipe pilihan) dan Side Rail biasa/ Side rail lipat, lemari samping, Meja atas kasur, Pijakan kaki, matras Cpro/ Busa Urethane

Ukuran Produk

Ukuran
P x L x T min-max : 2230 x 1030 x 760~1005

Berat Produk

Berat : ± 90KG
Kapasitas beban : ± 400KG (Statis) & ± 170KG (Dinamis)
Ukuran Kemasan : 2050 x 1070 mm x 190

Lot No :
Type :


PT. Chitose Internasional Tbk
Jln. Industri III No.5 Utama Cimahi
40533, Jawa Barat Indonesia

Showroom - Marketing Office
Distributor Center Jln. H.M.S.
Mintarejja Baros Cimahi 40521,
Indonesia Ph. +62 22 206 4777

Manufactured by Chitose

Chitose[®]
MANUFACTURER LABEL

SUCOFINDO
SNI
PCS 01095.01 SNI IEC 60601-2-52-2014
LSPr-022-IDN

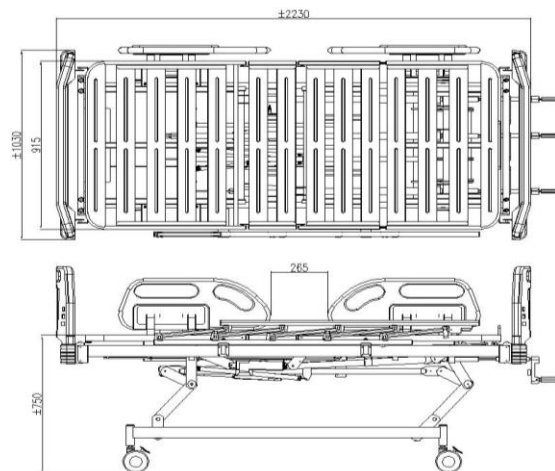

MANUFACTURE LABEL AND LOT NUMBER



IZIN EDAR KEMENKES
bahan dasar : sticker warna putih
posisi penempatan pada Frame

SNI LABEL

CB3003 plus



FEATURES & PROCEDURES



Standard Function

Operating System : 3 Crank operation for High-Low, Head Rest & Foot Rest positions

- Position : - High – low: Manual operation with Crank
 - Head rest: Manual operation with Crank, tilting from 0 to 80°
 - Foot rest : manual operation with Crank, tilting form 0° to 80°

- Primary : - Simple design, no sharp corners (smooth surface)
 - Easy operating mechanism, with Crank System
 - Sturdy and anti-rust
 - Wheels that are easy to move and position, with lock - unlock system

Lock System : Double Lock System on the Wheels

Accessories : IV Pole (2 Type Option) and Side Rail / Folding Side rail
 Bed Side Cabinet, Over Bed Table, and Foot Step
 Airmate Cpro Mattress / Urethane

Product Dimension

Dimension
 L x W x D : 2230 x 1030 x 760~1005

Product Weight

Weight : ± 90KG
 Load Capacity : ± 400KG (Static)
 & ±170KG (Dynamic)
 Packing Dimension : 2050 x 1070 mm x 190

Lot No :
 Type :

PT. Chitose Internasional Tbk
 Jln. Industri III No 5 Utama Cimahi
 40533, Jawa Barat Indonesia

Showroom - Marketing Office
 Distributor Center Jln. H.M.S.
 Mintaredja Baros Cimahi 40521,
 Indonesia Ph. +62 22 206 4777

Manufactured by Chitose

MANUFACTURE LABEL AND LOT NUMBER


Chitose[®]
 MANUFACTURER LABEL

SUCOFINDO
SNI
 PCS 01095.01 SNI IEC 60601-2-52-2014
 LSP7-022-IDN

SNI LABEL

Chitose bed
 KEMENKES RI AKD: _____

IZIN EDAR KEMENKES
 bahan dasar : sticker warna putih
 posisi penempatan pada Frame

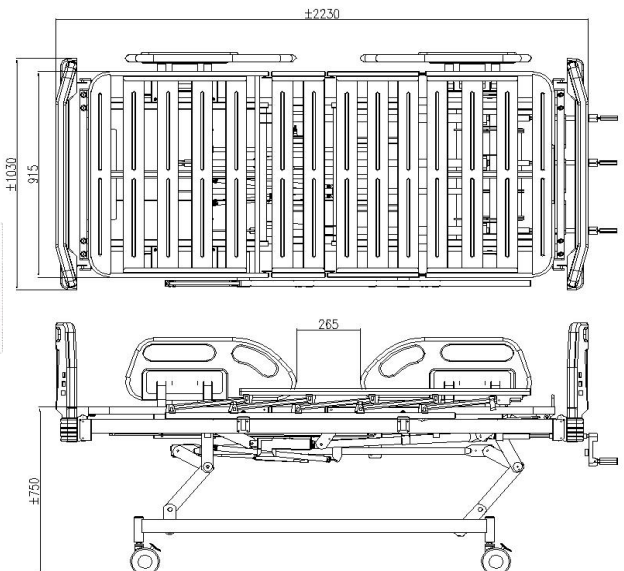

CB 3003 PLUS



Standard Function

- Operating System : 3 Crank operation for High-Low, Head Rest and Foot Rest positions
- Position : - High - low: Manual operation with Crank
- Head rest: Manual operation with Crank, tilting from 0 to 80 degrees
- Foot Rest: Manual operation with Crank, tilting from 0 to 80 degrees
- Primary : - Simple design, no sharp corners (smooth surface)
- Easy operating mechanism, with Crank System
- Sturdy and anti-rust
- Wheels that are easy to move and position, with lock - unlock system
- Lock System : Double Lock System on the Wheels
- Accessories : IV Pole (2 Type Option) and Side Rail / Folding Side rail
Bed Side Cabinet, Over Bed Table, and Foot Step
Aimate Cpro Mattress / Urethane



CRANK LABEL



**PERHATIAN !
PENGOPERASIAN HANDLE CRANK**

- Sebelum memutar handle crank, harap perhatikan :
Tangan Anak-anak, Hewan peliharaan, alat-alat dan bahan-bahan
Befores using the crank handle, please watch :
Hands, children, pets, other people, materials.
- Setelah memutar Handle, pasang kembali pada posisi terkunci untuk
menghindari jatuh Dae-tiba
After turning the crank handle, put back on locked position in order to avoid sudden falling down.
- Untuk menghindari terkane kaki, pasang Handle Crank pada posisi awal
(terkunci). Setelah selesai, maka Bed akan jatuh
In order to moving the, put the crank handle back on first position (locked). It is to, the bed weight fall
down.

Caution Handle operation



IZIN EDAR KEMENKES

PERHATIAN !

- Jangan menempatkan tangan
dibawah tempat tidur.
Do not place your hand under the bed
- Tempat tidur hanya digunakan
untuk satu orang.
Capacity for one person only

CAUTION LABEL

Lot No :
Type :

PT. Chitose Internasional Tbk
Jln. Industri III No.5 Utama Cimahi
40533, Jawa Barat Indonesia

Showroom - Marketing Office
Distributor Center Jln. H.M.S.
Mintaredja Baros Cimahi 40521,
Indonesia Ph. +62 22 206 4777

Manufactured by Chitose

MANUFACTURE LABEL AND LOT NUMBER

- 1 Lot Number and Product Type
- 2 Manufacture Information
- 3 Safe Workload Sign and Maksimum Weight Sign
- 4 Use Appropriate mattress Sign
See Manual Instruction Sign
- 5 Applied Part Sign
Do not Dispose as Household Waste Sign
Indoor Using Only Sign