

CHITOSE Hospital Bed

CB 3300 D



FEATURES & PROCEDURES



Head/foot board panel dismanile

Head/foot board panel installation



Fungsi Standar

- Operating System** : Motor penggerak untuk posisi tinggi-rendah, sandaran kaki dan sandaran kepala
- Posisi** : - Tinggi – Rendah : Pengoperasian secara otomatis menggunakan alat pengontrol genggam dengan motor penggerak
 - Sandaran Kepala dan Kaki : Pengoperasian secara otomatis menggunakan alat pengontrol genggam dengan motor penggerak
- Utama** : - Desain sederhana, tidak ada sudut tajam (Permukaan halus)
 - Mekanisme pengoperasian yang mudah, dengan motor penggerak
 - Kokoh dan anti karat
 - Roda yang mudah digerakkan dan ditempatkan, dengan sistem kunci dan tidak kunci
- Sistem kunci** : Sistem kunci total
- Asesoris** : Tiang IV(Pilihan 2 Tipe) dan Side Rail / Side rail Lipat
 Lemari sisi tempat tidur, Meja atas tempat tidur, dan pijakan kaki
 Matrass Airmate Cpro / Urethane

Ukuran Produk

Ukuran
 P x L x T : 932 x 2141 x 672-1012

Berat Produk

Berat Kosong : ± 90KG
 Berat beban : ± 400KG (Statis)
 & ±170KG (Dinamis)

PRODUCT DIMENSION



Lot No :
 Type :

PT. Chitose Internasional Tbk
 Jln. Industri III No.5 Utama Cimahi
 40533, Jawa Barat Indonesia

Showroom - Marketing Office
 Distributor Center Jln. H.M.S.
 Mirlaredeja Baros Cimahi 40521,
 Indonesia Pn. +62 22 206 4777

Manufactured by Chitose

AC 230V-50/60Hz
 Daily usage 2 min ON/10 min OFF
 Int: 1 10%, Max 2 min/ 18 min.

MANUFACTURE LABEL AND LOT NUMBER

Chitose bed
 KEMENKES RI AKD: _____

IZIN EDAR KEMENKES
 bahan dasar : sticker warna putih
 posisi penempatan pada Frame

Chitose[®]

MANUFACTURER LABEL

SUCOFINDO **SNI**
 PCS 01095.01 SNI IEC 60601-2-52-2014
 LSP-022-IDN

SNI LABEL

Disetujui Oleh	Revisi	Ditandatangani Oleh	Tgl. Efektif

1. Pemasangan Sticker Safety Notice dan Safety Label Head Board

SAFETY NOTICE



Posisi Pemasangan :
 Di Head Board, Rata tengah dan 10 mm dari bagian atas Wood Pattern Head Board
Pasang safety Notice terlebih dahulu, kemudian safety Label (jarak 10mm)

Pastikan :
 Pemasangan Rata / tidak miring
 Sticker melekat dengan sempurna



SAFETY LABEL



CB-XXXX O ST



CB-XXXX O JP



Direktori C&M	Revisi	Dibuat/di C&M	Tgl. Selesai

2. Pemasangan Sticker Lot Number, Logo, Caution dan SNI

CAUTION LABEL




VOLTAGE LABEL



LABEL SNI



LOGO

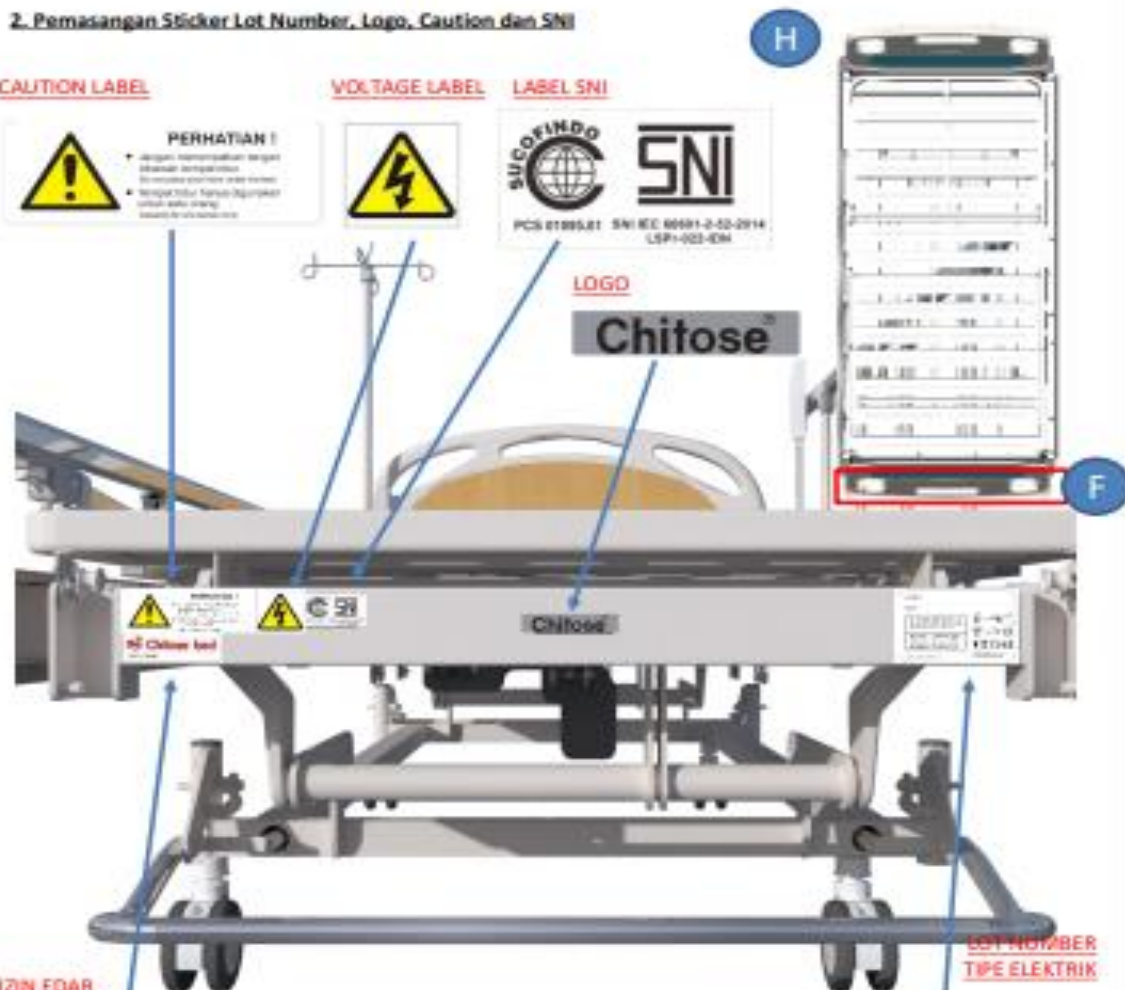

IZIN EDAR KEMENKES



Posisi Pemasangan:
Main Frame di area Foot Board

Pastikan:
Pemasangan Rata / tidak miring
Sticker melekat dengan sempurna
Label SNI memakai ukuran besar

LOT NUMBER
TIPE ELEKTRIK

Lot No :
 Tipe :

PT. Chitose International, Tbk
 an Industri di No. 5 Utama Cilandak
 40131, Jawa Barat 10019

Showroom - Marketing Office
 Chitose Center, Jln. H.S.S.
 Umarada Riamas Cimahi 38521,
 Indonesia Tlp. +62 22 258 4777

Made in Indonesia by Chitose